

Opbevar disse sikkerhedsoplysninger sammen med GlideScope-brugervejledningen



SIKKERHEDSOPLYSNINGER



ADVARSEL

For at sikre patientens sikkerhed skal GlideScope-videolaryngoskopbladet inspiceres før og efter hver brug for at sikre, at bladet er fri for ru overflader, skarpe kanter, revner, protrusioner eller anden indikation på slitage. Brug ikke et blad, der er beskadiget eller slidt, da det kan resultere i, at bladet brækker og medfører skade på patienten eller at patienten dør

- Sørg altid for, at have alternative metoder og udstyr til håndtering af luftveje klar.

Instruktioner vedrørende inspektion

1. Inspicér regelmæssigt flergangs GlideScope-videolaryngoskopbladet før og efter hver brug for at identificere enhver skade eller slitage, der kan føre til brud (se eksempler på bagsiden). Det er vigtigt at udføre regelmæssige inspektioner gennem produktets levetid for patientens sikkerhed.
2. Stop straks brugen, hvis inspektionen afslører en af følgende defekter:
 - Ru overflader
 - Protrusioner
 - Skarpe kanter
 - Overfladedelaminering
 - Revner
 - Løsrivelse af yderbeklædning
3. Rapportér mistanke om defekte blade til Verathon Kundeservice på:

Telefon: +31 30 68 70 570

E-mail: customer careEU@verathon.com


Synlige tegn på skade eller slitage

Skader og slitage, der kan påvirke sikkerheden, er vist i de røde cirkler. På baggrund af accelererede test viser nedenstående billeder eksempler på skader og slitage fremkommet under værst tænkelige forhold.


Overfladenedbrydning



Revner

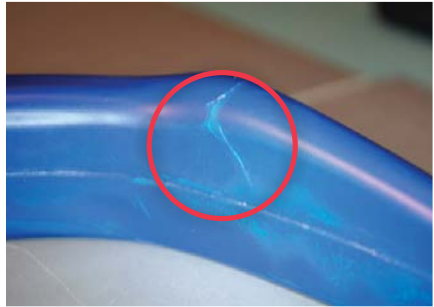

Revner i kameravindue

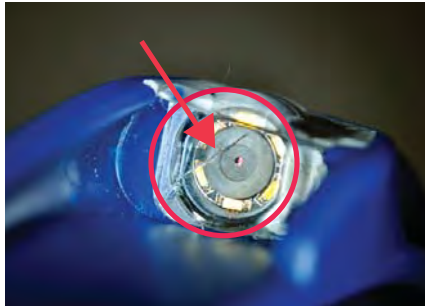

For mere detaljeret produktoplysninger, se [GlideScope-brugervejledningen](#).



Hovedkontor:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tlf.: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896

 **Producent:**
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, British Columbia
Canada, V5C 5A9



 **Repræsentant i EU:**
Verathon Medical (Europe) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, The Netherlands
Tlf.: +31 30 68 70 570
Fax: +31 30 68 70 512

GlideScope, GlideScope-symbolet, GVL, Verathon og Verathon Torch-symbolet er varemærker tilhørende Verathon Inc. ©2013 Verathon Inc. GlideScope-videolaryngoskopsystemer er CE-mærket i overensstemmelse med Direktiv om medicinsk udstyr, og Verathon Inc.-kvalitetssystemet er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 13485:2003-standarder.