

**Reference: 92977025-FA**

30. november 2023

## **Haster – Vigtig sikkerhedsmeddelelse Model 3120 ZOOM PRM med Model 2892 Software**

**Emne: Vigtig sikkerhedsmeddelelse** – Fra den 10. januar 2024 vil den ur-parameter, der bruges af model 2892-softwareapplikationen på model 3120 ZOOM™-programmeringsenheden, vise visse diagnosedatoer forkert. Boston Scientific brugerhandlingsreference: 92977025-FA.

Kære læge eller sundhedsfaglige medarbejder,

Vi skriver for at informere dig om, at fra og med den 10. Januar 2024 vil ur-parameteren, der bruges af model 2892-softwareapplikationen på model 3120 ZOOM-programmeren, vise visse diagnosedatoer forkert med et år i 1990'erne. Model 2892-softwareapplikationen understøtter ca. 8.400 af de resterende pacemakere i ALTRUA™-, INSIGNIA™- og NEXUS™-serien, som blev distribueret mellem oktober 2001 og august 2018. Dette problem påvirker ikke pacemakerens funktionalitet. Model 3120 ZOOM-programmeren er ved at være udtjent og bliver erstattet af model 3300 LATITUDE™-programmeren.

### **Beskrivelse af uforudset adfærd og klinisk konsekvens:**

Model 2892-softwareapplikationen bestemmer datooplysninger ved hjælp af model 3120 ZOOM-programmerens ur. Baseret på designet af model 2892-softwareapplikationen understøtter ur-parameteren datoer fra 1. januar 1990 til 10. januar 2024. Efter denne dato vil ur-parameteren genstarte og fejlagtigt vise visse diagnosedatoer på programmeringsskærmen, save-to-disk og i udskrevne rapporter.

- Berørte diagnosedatoer, som vil blive vist forkert den 10. januar 2024 eller senere, omfatter dato for sidste batteritest, sidste programmeringsdato, sidste interrogeringsdato, sidste nulstilling af tæller/histogrammer og datoerne for opfølgningstest såsom intrinsisk amplitude, stimuleringsimpedans og stimuleringsstærkeltest.  
Bemærk, at alle datoer vises korrekt på en Model 3300 LATITUDE-programmer.
- Datoen for udskiftningsindikatoren og datoen for hændelser i arytmilogbogen påvirkes ikke og vises korrekt.
- Det har ingen indflydelse på pacemakerens ydeevne, pacemakerens faktiske resterende levetid eller batteriets målevning.

Denne adfærd påvirker kun pacemakere, der understøttes med Model 2892-softwaren på Model 3120 ZOOM-programmeringsenheden, og påvirker ikke datoer, der vises på Model 3300 LATITUDE-programmeringsenheden eller LATITUDE Consult™-systemet.

#### **Anbefaling:**

- Opbevar dette brev sammen med alle Model 3120-programmerer på dit center eller videregiv eller videresend dette brev til alle sundhedsmedarbejdere, der udfører pacemakerkontrol ved hjælp af en Model 3120 ZOOM-programmer. Når man bruger model 2892-softwareapplikationen på model 3120 ZOOM-programmeringsenheden, kan sundhedspersonalet, hvis en dato omfatter et år i 1990'erne:
  - Bestemme en præcis dato ved at interrogere en ALTRUA-, INSIGNIA- eller NEXUS-pacemaker med en Model 3300 LATITUDE-programmer; eller
  - Bestemme en omtrentlig dato (inden for et interval på to dage) ved hjælp af tabellen i bilag A.
- Hos Boston Scientific fraråder vi profylaktisk udskiftning af pacemakere på grund af forkerte datoer.
- **Udfyld vedlagte kvitteringsblanket, og send den til Boston Scientific på «Customer\_Service\_Fax\_Number» inden 22. december 2023.** Alle organisationer, der modtager dette brev, skal returnere den udfyldte formular.


#### **Yderligere oplysninger:**

De ansvarlige myndigheder er blevet informeret om denne vigtige produktinformation.

Vi ved, at videregivelsen af denne type information har konsekvenser for både jer og jeres patienter, så vi bestræber os altid på at kommunikere klart og tydeligt med læger og andre sundhedsfaglige personer for at sikre, at I modtager rettidig og relevant information med henblik på patientbehandling.

Kontakt venligst Boston Scientifics repræsentant eller tekniske service og din lokale tilsynsmyndighed, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende disse oplysninger, eller hvis du ønsker at indberette en bivirkning.

Med venlig hilsen

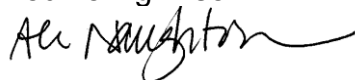

Alexandra Naughton  
Vice President, Quality Assurance

## Bilag A

Baseret på designet af model 2892-softwareapplikationen understøtter ur-parameteren datoer fra den 1. januar 1990 til kl. til 13:37 lokal tid den 10. januar 2024. Efter denne dato vil ur-parameteren genstarte og fejlagtigt vise visse diagnosedatoer på programmeringsskærmen, save-to-disk og i udskrevne rapporter.

Da ur-parameteren genstarter kl. 13:37 lokal tid den 10. januar 2024, vil den faktiske dato enten være den omtrentlige dato, der er angivet nedenfor, eller den næste dag afhængigt af tidspunktet på dagen, hvor diagnosedatoen fandt sted. En præcis dato kan bestemmes ved at interrogere pacemakeren med en model 3300 LATITUDE programmer.

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
1-Jan-1990	10-Jan-2024	4-Feb-1990	13-Feb-2024	10-Mar-1990	18-Mar-2024	13-Apr-1990	21-Apr-2024
2-Jan-1990	11-Jan-2024	5-Feb-1990	14-Feb-2024	11-Mar-1990	19-Mar-2024	14-Apr-1990	22-Apr-2024
3-Jan-1990	12-Jan-2024	6-Feb-1990	15-Feb-2024	12-Mar-1990	20-Mar-2024	15-Apr-1990	23-Apr-2024
4-Jan-1990	13-Jan-2024	7-Feb-1990	16-Feb-2024	13-Mar-1990	21-Mar-2024	16-Apr-1990	24-Apr-2024
5-Jan-1990	14-Jan-2024	8-Feb-1990	17-Feb-2024	14-Mar-1990	22-Mar-2024	17-Apr-1990	25-Apr-2024
6-Jan-1990	15-Jan-2024	9-Feb-1990	18-Feb-2024	15-Mar-1990	23-Mar-2024	18-Apr-1990	26-Apr-2024
7-Jan-1990	16-Jan-2024	10-Feb-1990	19-Feb-2024	16-Mar-1990	24-Mar-2024	19-Apr-1990	27-Apr-2024
8-Jan-1990	17-Jan-2024	11-Feb-1990	20-Feb-2024	17-Mar-1990	25-Mar-2024	20-Apr-1990	28-Apr-2024
9-Jan-1990	18-Jan-2024	12-Feb-1990	21-Feb-2024	18-Mar-1990	26-Mar-2024	21-Apr-1990	29-Apr-2024
10-Jan-1990	19-Jan-2024	13-Feb-1990	22-Feb-2024	19-Mar-1990	27-Mar-2024	22-Apr-1990	30-Apr-2024
11-Jan-1990	20-Jan-2024	14-Feb-1990	23-Feb-2024	20-Mar-1990	28-Mar-2024	23-Apr-1990	1-May-2024
12-Jan-1990	21-Jan-2024	15-Feb-1990	24-Feb-2024	21-Mar-1990	29-Mar-2024	24-Apr-1990	2-May-2024
13-Jan-1990	22-Jan-2024	16-Feb-1990	25-Feb-2024	22-Mar-1990	30-Mar-2024	25-Apr-1990	3-May-2024
14-Jan-1990	23-Jan-2024	17-Feb-1990	26-Feb-2024	23-Mar-1990	31-Mar-2024	26-Apr-1990	4-May-2024
15-Jan-1990	24-Jan-2024	18-Feb-1990	27-Feb-2024	24-Mar-1990	1-Apr-2024	27-Apr-1990	5-May-2024
16-Jan-1990	25-Jan-2024	19-Feb-1990	28-Feb-2024	25-Mar-1990	2-Apr-2024	28-Apr-1990	6-May-2024
17-Jan-1990	26-Jan-2024	20-Feb-1990	29-Feb-2024	26-Mar-1990	3-Apr-2024	29-Apr-1990	7-May-2024
18-Jan-1990	27-Jan-2024	21-Feb-1990	1-Mar-2024	27-Mar-1990	4-Apr-2024	30-Apr-1990	8-May-2024
19-Jan-1990	28-Jan-2024	22-Feb-1990	2-Mar-2024	28-Mar-1990	5-Apr-2024	1-May-1990	9-May-2024
20-Jan-1990	29-Jan-2024	23-Feb-1990	3-Mar-2024	29-Mar-1990	6-Apr-2024	2-May-1990	10-May-2024
21-Jan-1990	30-Jan-2024	24-Feb-1990	4-Mar-2024	30-Mar-1990	7-Apr-2024	3-May-1990	11-May-2024
22-Jan-1990	31-Jan-2024	25-Feb-1990	5-Mar-2024	31-Mar-1990	8-Apr-2024	4-May-1990	12-May-2024
23-Jan-1990	1-Feb-2024	26-Feb-1990	6-Mar-2024	1-Apr-1990	9-Apr-2024	5-May-1990	13-May-2024
24-Jan-1990	2-Feb-2024	27-Feb-1990	7-Mar-2024	2-Apr-1990	10-Apr-2024	6-May-1990	14-May-2024
25-Jan-1990	3-Feb-2024	28-Feb-1990	8-Mar-2024	3-Apr-1990	11-Apr-2024	7-May-1990	15-May-2024
26-Jan-1990	4-Feb-2024	1-Mar-1990	9-Mar-2024	4-Apr-1990	12-Apr-2024	8-May-1990	16-May-2024
27-Jan-1990	5-Feb-2024	2-Mar-1990	10-Mar-2024	5-Apr-1990	13-Apr-2024	9-May-1990	17-May-2024
28-Jan-1990	6-Feb-2024	3-Mar-1990	11-Mar-2024	6-Apr-1990	14-Apr-2024	10-May-1990	18-May-2024
29-Jan-1990	7-Feb-2024	4-Mar-1990	12-Mar-2024	7-Apr-1990	15-Apr-2024	11-May-1990	19-May-2024
30-Jan-1990	8-Feb-2024	5-Mar-1990	13-Mar-2024	8-Apr-1990	16-Apr-2024	12-May-1990	20-May-2024
31-Jan-1990	9-Feb-2024	6-Mar-1990	14-Mar-2024	9-Apr-1990	17-Apr-2024	13-May-1990	21-May-2024
1-Feb-1990	10-Feb-2024	7-Mar-1990	15-Mar-2024	10-Apr-1990	18-Apr-2024	14-May-1990	22-May-2024
2-Feb-1990	11-Feb-2024	8-Mar-1990	16-Mar-2024	11-Apr-1990	19-Apr-2024	15-May-1990	23-May-2024
3-Feb-1990	12-Feb-2024	9-Mar-1990	17-Mar-2024	12-Apr-1990	20-Apr-2024	16-May-1990	24-May-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
17-May-1990	25-May-2024	4-Jul-1990	12-Jul-2024	21-Aug-1990	29-Aug-2024	8-Oct-1990	16-Oct-2024
18-May-1990	26-May-2024	5-Jul-1990	13-Jul-2024	22-Aug-1990	30-Aug-2024	9-Oct-1990	17-Oct-2024
19-May-1990	27-May-2024	6-Jul-1990	14-Jul-2024	23-Aug-1990	31-Aug-2024	10-Oct-1990	18-Oct-2024
20-May-1990	28-May-2024	7-Jul-1990	15-Jul-2024	24-Aug-1990	1-Sep-2024	11-Oct-1990	19-Oct-2024
21-May-1990	29-May-2024	8-Jul-1990	16-Jul-2024	25-Aug-1990	2-Sep-2024	12-Oct-1990	20-Oct-2024
22-May-1990	30-May-2024	9-Jul-1990	17-Jul-2024	26-Aug-1990	3-Sep-2024	13-Oct-1990	21-Oct-2024
23-May-1990	31-May-2024	10-Jul-1990	18-Jul-2024	27-Aug-1990	4-Sep-2024	14-Oct-1990	22-Oct-2024
24-May-1990	1-Jun-2024	11-Jul-1990	19-Jul-2024	28-Aug-1990	5-Sep-2024	15-Oct-1990	23-Oct-2024
25-May-1990	2-Jun-2024	12-Jul-1990	20-Jul-2024	29-Aug-1990	6-Sep-2024	16-Oct-1990	24-Oct-2024
26-May-1990	3-Jun-2024	13-Jul-1990	21-Jul-2024	30-Aug-1990	7-Sep-2024	17-Oct-1990	25-Oct-2024
27-May-1990	4-Jun-2024	14-Jul-1990	22-Jul-2024	31-Aug-1990	8-Sep-2024	18-Oct-1990	26-Oct-2024
28-May-1990	5-Jun-2024	15-Jul-1990	23-Jul-2024	1-Sep-1990	9-Sep-2024	19-Oct-1990	27-Oct-2024
29-May-1990	6-Jun-2024	16-Jul-1990	24-Jul-2024	2-Sep-1990	10-Sep-2024	20-Oct-1990	28-Oct-2024
30-May-1990	7-Jun-2024	17-Jul-1990	25-Jul-2024	3-Sep-1990	11-Sep-2024	21-Oct-1990	29-Oct-2024
31-May-1990	8-Jun-2024	18-Jul-1990	26-Jul-2024	4-Sep-1990	12-Sep-2024	22-Oct-1990	30-Oct-2024
1-Jun-1990	9-Jun-2024	19-Jul-1990	27-Jul-2024	5-Sep-1990	13-Sep-2024	23-Oct-1990	31-Oct-2024
2-Jun-1990	10-Jun-2024	20-Jul-1990	28-Jul-2024	6-Sep-1990	14-Sep-2024	24-Oct-1990	1-Nov-2024
3-Jun-1990	11-Jun-2024	21-Jul-1990	29-Jul-2024	7-Sep-1990	15-Sep-2024	25-Oct-1990	2-Nov-2024
4-Jun-1990	12-Jun-2024	22-Jul-1990	30-Jul-2024	8-Sep-1990	16-Sep-2024	26-Oct-1990	3-Nov-2024
5-Jun-1990	13-Jun-2024	23-Jul-1990	31-Jul-2024	9-Sep-1990	17-Sep-2024	27-Oct-1990	4-Nov-2024
6-Jun-1990	14-Jun-2024	24-Jul-1990	1-Aug-2024	10-Sep-1990	18-Sep-2024	28-Oct-1990	5-Nov-2024
7-Jun-1990	15-Jun-2024	25-Jul-1990	2-Aug-2024	11-Sep-1990	19-Sep-2024	29-Oct-1990	6-Nov-2024
8-Jun-1990	16-Jun-2024	26-Jul-1990	3-Aug-2024	12-Sep-1990	20-Sep-2024	30-Oct-1990	7-Nov-2024
9-Jun-1990	17-Jun-2024	27-Jul-1990	4-Aug-2024	13-Sep-1990	21-Sep-2024	31-Oct-1990	8-Nov-2024
10-Jun-1990	18-Jun-2024	28-Jul-1990	5-Aug-2024	14-Sep-1990	22-Sep-2024	1-Nov-1990	9-Nov-2024
11-Jun-1990	19-Jun-2024	29-Jul-1990	6-Aug-2024	15-Sep-1990	23-Sep-2024	2-Nov-1990	10-Nov-2024
12-Jun-1990	20-Jun-2024	30-Jul-1990	7-Aug-2024	16-Sep-1990	24-Sep-2024	3-Nov-1990	11-Nov-2024
13-Jun-1990	21-Jun-2024	31-Jul-1990	8-Aug-2024	17-Sep-1990	25-Sep-2024	4-Nov-1990	12-Nov-2024
14-Jun-1990	22-Jun-2024	1-Aug-1990	9-Aug-2024	18-Sep-1990	26-Sep-2024	5-Nov-1990	13-Nov-2024
15-Jun-1990	23-Jun-2024	2-Aug-1990	10-Aug-2024	19-Sep-1990	27-Sep-2024	6-Nov-1990	14-Nov-2024
16-Jun-1990	24-Jun-2024	3-Aug-1990	11-Aug-2024	20-Sep-1990	28-Sep-2024	7-Nov-1990	15-Nov-2024
17-Jun-1990	25-Jun-2024	4-Aug-1990	12-Aug-2024	21-Sep-1990	29-Sep-2024	8-Nov-1990	16-Nov-2024
18-Jun-1990	26-Jun-2024	5-Aug-1990	13-Aug-2024	22-Sep-1990	30-Sep-2024	9-Nov-1990	17-Nov-2024
19-Jun-1990	27-Jun-2024	6-Aug-1990	14-Aug-2024	23-Sep-1990	1-Oct-2024	10-Nov-1990	18-Nov-2024
20-Jun-1990	28-Jun-2024	7-Aug-1990	15-Aug-2024	24-Sep-1990	2-Oct-2024	11-Nov-1990	19-Nov-2024
21-Jun-1990	29-Jun-2024	8-Aug-1990	16-Aug-2024	25-Sep-1990	3-Oct-2024	12-Nov-1990	20-Nov-2024
22-Jun-1990	30-Jun-2024	9-Aug-1990	17-Aug-2024	26-Sep-1990	4-Oct-2024	13-Nov-1990	21-Nov-2024
23-Jun-1990	1-Jul-2024	10-Aug-1990	18-Aug-2024	27-Sep-1990	5-Oct-2024	14-Nov-1990	22-Nov-2024
24-Jun-1990	2-Jul-2024	11-Aug-1990	19-Aug-2024	28-Sep-1990	6-Oct-2024	15-Nov-1990	23-Nov-2024
25-Jun-1990	3-Jul-2024	12-Aug-1990	20-Aug-2024	29-Sep-1990	7-Oct-2024	16-Nov-1990	24-Nov-2024
26-Jun-1990	4-Jul-2024	13-Aug-1990	21-Aug-2024	30-Sep-1990	8-Oct-2024	17-Nov-1990	25-Nov-2024
27-Jun-1990	5-Jul-2024	14-Aug-1990	22-Aug-2024	1-Oct-1990	9-Oct-2024	18-Nov-1990	26-Nov-2024
28-Jun-1990	6-Jul-2024	15-Aug-1990	23-Aug-2024	2-Oct-1990	10-Oct-2024	19-Nov-1990	27-Nov-2024
29-Jun-1990	7-Jul-2024	16-Aug-1990	24-Aug-2024	3-Oct-1990	11-Oct-2024	20-Nov-1990	28-Nov-2024
30-Jun-1990	8-Jul-2024	17-Aug-1990	25-Aug-2024	4-Oct-1990	12-Oct-2024	21-Nov-1990	29-Nov-2024
1-Jul-1990	9-Jul-2024	18-Aug-1990	26-Aug-2024	5-Oct-1990	13-Oct-2024	22-Nov-1990	30-Nov-2024
2-Jul-1990	10-Jul-2024	19-Aug-1990	27-Aug-2024	6-Oct-1990	14-Oct-2024	23-Nov-1990	1-Dec-2024
3-Jul-1990	11-Jul-2024	20-Aug-1990	28-Aug-2024	7-Oct-1990	15-Oct-2024	24-Nov-1990	2-Dec-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
25-Nov-1990	3-Dec-2024	12-Jan-1991	20-Jan-2025	1-Mar-1991	9-Mar-2025	18-Apr-1991	26-Apr-2025
26-Nov-1990	4-Dec-2024	13-Jan-1991	21-Jan-2025	2-Mar-1991	10-Mar-2025	19-Apr-1991	27-Apr-2025
27-Nov-1990	5-Dec-2024	14-Jan-1991	22-Jan-2025	3-Mar-1991	11-Mar-2025	20-Apr-1991	28-Apr-2025
28-Nov-1990	6-Dec-2024	15-Jan-1991	23-Jan-2025	4-Mar-1991	12-Mar-2025	21-Apr-1991	29-Apr-2025
29-Nov-1990	7-Dec-2024	16-Jan-1991	24-Jan-2025	5-Mar-1991	13-Mar-2025	22-Apr-1991	30-Apr-2025
30-Nov-1990	8-Dec-2024	17-Jan-1991	25-Jan-2025	6-Mar-1991	14-Mar-2025	23-Apr-1991	1-May-2025
1-Dec-1990	9-Dec-2024	18-Jan-1991	26-Jan-2025	7-Mar-1991	15-Mar-2025	24-Apr-1991	2-May-2025
2-Dec-1990	10-Dec-2024	19-Jan-1991	27-Jan-2025	8-Mar-1991	16-Mar-2025	25-Apr-1991	3-May-2025
3-Dec-1990	11-Dec-2024	20-Jan-1991	28-Jan-2025	9-Mar-1991	17-Mar-2025	26-Apr-1991	4-May-2025
4-Dec-1990	12-Dec-2024	21-Jan-1991	29-Jan-2025	10-Mar-1991	18-Mar-2025	27-Apr-1991	5-May-2025
5-Dec-1990	13-Dec-2024	22-Jan-1991	30-Jan-2025	11-Mar-1991	19-Mar-2025	28-Apr-1991	6-May-2025
6-Dec-1990	14-Dec-2024	23-Jan-1991	31-Jan-2025	12-Mar-1991	20-Mar-2025	29-Apr-1991	7-May-2025
7-Dec-1990	15-Dec-2024	24-Jan-1991	1-Feb-2025	13-Mar-1991	21-Mar-2025	30-Apr-1991	8-May-2025
8-Dec-1990	16-Dec-2024	25-Jan-1991	2-Feb-2025	14-Mar-1991	22-Mar-2025	1-May-1991	9-May-2025
9-Dec-1990	17-Dec-2024	26-Jan-1991	3-Feb-2025	15-Mar-1991	23-Mar-2025	2-May-1991	10-May-2025
10-Dec-1990	18-Dec-2024	27-Jan-1991	4-Feb-2025	16-Mar-1991	24-Mar-2025	3-May-1991	11-May-2025
11-Dec-1990	19-Dec-2024	28-Jan-1991	5-Feb-2025	17-Mar-1991	25-Mar-2025	4-May-1991	12-May-2025
12-Dec-1990	20-Dec-2024	29-Jan-1991	6-Feb-2025	18-Mar-1991	26-Mar-2025	5-May-1991	13-May-2025
13-Dec-1990	21-Dec-2024	30-Jan-1991	7-Feb-2025	19-Mar-1991	27-Mar-2025	6-May-1991	14-May-2025
14-Dec-1990	22-Dec-2024	31-Jan-1991	8-Feb-2025	20-Mar-1991	28-Mar-2025	7-May-1991	15-May-2025
15-Dec-1990	23-Dec-2024	1-Feb-1991	9-Feb-2025	21-Mar-1991	29-Mar-2025	8-May-1991	16-May-2025
16-Dec-1990	24-Dec-2024	2-Feb-1991	10-Feb-2025	22-Mar-1991	30-Mar-2025	9-May-1991	17-May-2025
17-Dec-1990	25-Dec-2024	3-Feb-1991	11-Feb-2025	23-Mar-1991	31-Mar-2025	10-May-1991	18-May-2025
18-Dec-1990	26-Dec-2024	4-Feb-1991	12-Feb-2025	24-Mar-1991	1-Apr-2025	11-May-1991	19-May-2025
19-Dec-1990	27-Dec-2024	5-Feb-1991	13-Feb-2025	25-Mar-1991	2-Apr-2025	12-May-1991	20-May-2025
20-Dec-1990	28-Dec-2024	6-Feb-1991	14-Feb-2025	26-Mar-1991	3-Apr-2025	13-May-1991	21-May-2025
21-Dec-1990	29-Dec-2024	7-Feb-1991	15-Feb-2025	27-Mar-1991	4-Apr-2025	14-May-1991	22-May-2025
22-Dec-1990	30-Dec-2024	8-Feb-1991	16-Feb-2025	28-Mar-1991	5-Apr-2025	15-May-1991	23-May-2025
23-Dec-1990	31-Dec-2024	9-Feb-1991	17-Feb-2025	29-Mar-1991	6-Apr-2025	16-May-1991	24-May-2025
24-Dec-1990	1-Jan-2025	10-Feb-1991	18-Feb-2025	30-Mar-1991	7-Apr-2025	17-May-1991	25-May-2025
25-Dec-1990	2-Jan-2025	11-Feb-1991	19-Feb-2025	31-Mar-1991	8-Apr-2025	18-May-1991	26-May-2025
26-Dec-1990	3-Jan-2025	12-Feb-1991	20-Feb-2025	1-Apr-1991	9-Apr-2025	19-May-1991	27-May-2025
27-Dec-1990	4-Jan-2025	13-Feb-1991	21-Feb-2025	2-Apr-1991	10-Apr-2025	20-May-1991	28-May-2025
28-Dec-1990	5-Jan-2025	14-Feb-1991	22-Feb-2025	3-Apr-1991	11-Apr-2025	21-May-1991	29-May-2025
29-Dec-1990	6-Jan-2025	15-Feb-1991	23-Feb-2025	4-Apr-1991	12-Apr-2025	22-May-1991	30-May-2025
30-Dec-1990	7-Jan-2025	16-Feb-1991	24-Feb-2025	5-Apr-1991	13-Apr-2025	23-May-1991	31-May-2025
31-Dec-1990	8-Jan-2025	17-Feb-1991	25-Feb-2025	6-Apr-1991	14-Apr-2025	24-May-1991	1-Jun-2025
1-Jan-1991	9-Jan-2025	18-Feb-1991	26-Feb-2025	7-Apr-1991	15-Apr-2025	25-May-1991	2-Jun-2025
2-Jan-1991	10-Jan-2025	19-Feb-1991	27-Feb-2025	8-Apr-1991	16-Apr-2025	26-May-1991	3-Jun-2025
3-Jan-1991	11-Jan-2025	20-Feb-1991	28-Feb-2025	9-Apr-1991	17-Apr-2025	27-May-1991	4-Jun-2025
4-Jan-1991	12-Jan-2025	21-Feb-1991	1-Mar-2025	10-Apr-1991	18-Apr-2025	28-May-1991	5-Jun-2025
5-Jan-1991	13-Jan-2025	22-Feb-1991	2-Mar-2025	11-Apr-1991	19-Apr-2025	29-May-1991	6-Jun-2025
6-Jan-1991	14-Jan-2025	23-Feb-1991	3-Mar-2025	12-Apr-1991	20-Apr-2025	30-May-1991	7-Jun-2025
7-Jan-1991	15-Jan-2025	24-Feb-1991	4-Mar-2025	13-Apr-1991	21-Apr-2025	31-May-1991	8-Jun-2025
8-Jan-1991	16-Jan-2025	25-Feb-1991	5-Mar-2025	14-Apr-1991	22-Apr-2025	1-Jun-1991	9-Jun-2025
9-Jan-1991	17-Jan-2025	26-Feb-1991	6-Mar-2025	15-Apr-1991	23-Apr-2025	2-Jun-1991	10-Jun-2025
10-Jan-1991	18-Jan-2025	27-Feb-1991	7-Mar-2025	16-Apr-1991	24-Apr-2025	3-Jun-1991	11-Jun-2025
11-Jan-1991	19-Jan-2025	28-Feb-1991	8-Mar-2025	17-Apr-1991	25-Apr-2025	4-Jun-1991	12-Jun-2025

Udfyld denne blanket, og send den til:  
«Customer\_Service\_Fax\_Number»

«Sold\_to» - «Hospital\_Name» - «City» - «Country»

---

**Kvitteringsblanket – Vigtig sikkerhedsmeddelelse**

**Model 3120 ZOOM PRM med Model 2892 Software**

**92977025-FA**

---

**Med min underskrift på denne blanket bekræfter jeg, at**

**Jeg har læst og forstået  
vigtige produktinformation fra Boston Scientific**

**fra 30. november 2023 vedrørende:**

**Model 3120 ZOOM PRM med Model 2892 Software**

**NAVN\*** \_\_\_\_\_ **Titel** \_\_\_\_\_

**Telefon** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**UNDERSKRIFT\*** \_\_\_\_\_ **DATO\*** \_\_\_\_\_

\* Skal udfyldes

dd/mm/åååå